



Bedienungsanleitung

iNet Einrichtungen

Ilper iNet - Inspektionen

Ausgabedatum: 20.01.2020

Inhalt

Thema	Seite
Verwalten der Inspektion	3
Verwaltung der Zimmer	4
Auswahl Prüflinien	5
<i>Prüflinien manuell aktualisieren für ein Zimmer</i>	5
<i>Einzelne nichtgewählte Prüflinien hinzufügen</i>	5
Inspektion durchführen	6
<i>Einzelinspektion einer ausgewählten Prüflinie</i>	6
Aktualisierung der Prüflinien	7
Ausgabe	8
<i>PDF-Ausgabe</i>	8
<i>Ausgabe als csv-Datei</i>	8
Wichtige Anmerkungen	9



Angemeldet als:

Zimmer Auswahl Prüflinien Inspektion durchführen Aktualisierung Prüflinien Ausgabe als:

Auswahl: Alle Inspektionszeitraum: 3

Zimmer:	freier Zimmertext:	Anmerkungen Prüflinie:	geprüft:
Bad:127 *127	<input type="text"/>		
	Anwesenheit	<input type="text"/>	23.01.2019
	WC-Ruf	<input type="text"/>	23.01.2019
	Zi-Ruf	<input type="text"/>	05.09.2018
Bad:227 *227	<input type="text"/>		
	Anwesenheit	<input type="text"/>	20.01.2019
	WC-Ruf	<input type="text"/>	13.12.2018
Bad:321 *321	<input type="text"/>		
	Anwesenheit	<input type="text"/>	04.11.2018
	WC-Ruf	<input type="text"/>	14.06.2018
	Zi-Ruf	<input type="text"/>	04.11.2018

Hier werden Ihnen die Auflistung der Zimmer und in den Unterlisten die jeweiligen Prüflinien angezeigt.

Beim Erstaufwurf werden Ihnen nur die Zimmer aufgelistet! Die Prüflinien müssen dann erst in den „**Auswahl Prüflinien**“ gewählt werden. Als nächstes muss über „**Aktualisierung Prüflinien**“ die Liste vervollständigt werden.

Ändern Sie in der „**Auswahl Prüflinien**“ die Auswahl (hinzufügen oder löschen von Prüflinien), dann müssen Sie über „**Aktualisieren Prüflinien**“ die Liste aktualisieren. Es wird auch gleichzeitig geprüft, ob innerhalb des Prüfzeitraums (Inspektionszeitraums 3 bzw 12 Monate) die Meldung vom System geprüft wurde. Das aktuellste Prüfdatum wird für jede Prüflinie angezeigt. Liegt das Prüfdatum innerhalb des Inspektionszeitraumes, so wird die Zeile grün angezeigt, andernfalls in rot.

Alle rot markierten Linien müssen manuell geprüft werden und können nach 24 Stunden erneut über „**Inspektion durchführen**“ erneut geprüft und aktualisiert werden.


Anmerkungen zu den Zimmern und Prüflinien lassen sich hinzufügen.

Zur Erleichterung der Inspektion und für Ihre Ablage lassen sich die Prüflinien als PDF-Datei bzw. csv-Datentabelle ausgeben.


Für jedes Zimmer können Sie auch manuell einzelne Prüflinien hinzufügen, löschen und prüfen.




Über das Auswahlfeld können Sie einzelne Zimmer suchen und selektieren. Geben Sie wieder „Alle“ ein, so wird Ihnen wieder die vollständige Liste angezeigt. Über die Auswahl „**Inspektionszeitraum**“ können Sie wählen 3 bzw 12 Monate.

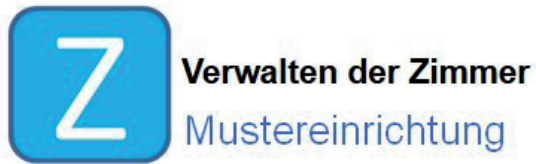Verwaltung der Zimmer

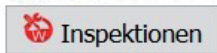

Angemeldet als:




Zimmer:	freier Zimmertext:
 Bad:127 *127	<input type="text"/>
 Bad:227 *227	<input type="text"/>
 Bad:321 *321	<input type="text"/>
 Bad:424 *424	<input type="text"/>
 Bad:518 *518	<input type="text"/>
 Bad:612 *612	<input type="text"/>
 Caffeteria EG *025	<input type="text"/>
 Esszimmer:638 *638	<input type="text"/>
 Esszimmer:107 *107	1.OG Esszimmer 107
 Esszimmer:207 *207	2.OG Esszimmer 207
 Esszimmer:328 *328	<input type="text"/>
 Esszimmer:407 *407	<input type="text"/>
 Esszimmer:526 *526	<input type="text"/>

Mit dem Button „**Zimmer**“ wird das Tool „**Verwalten der Zimmer aufgerufen**“.


Hier können Sie freie Anmerkungen zu den Zimmern eintragen.

Auswahl Prüflinien

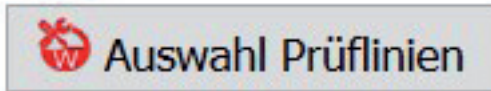

Auswahl der Prüflinien Mustereinrichtung

Angemeldet als:

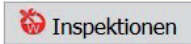

Prüflinie:	Auswahl für Inspektion:
Anwesenheit	<input checked="" type="checkbox"/>
Anwesenheit St.-E	<input type="checkbox"/>
Anwesenheit St.-L	<input type="checkbox"/>
Anwesenheit Stecker-R	<input type="checkbox"/>
Anwesenheit Stecker-R St.-E	<input type="checkbox"/>
Bett-1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bett-1 Anwesenheit	<input type="checkbox"/>
Bett-1 Anwesenheit St.-E	<input type="checkbox"/>
Bett-1 Bett-2	<input type="checkbox"/>
Bett-1 Bett-2 Diagn.-Ruf	<input type="checkbox"/>
Bett-1 Bett-2 Diagn.-Ruf Service	<input type="checkbox"/>
Bett-1 Bett-2 Diagn.-Ruf St.-L	<input type="checkbox"/>
Bett-1 Bett-2 Diagn.-Ruf WC-Ruf	<input type="checkbox"/>

In dieser Liste werden Ihnen alle für Ihre Einrichtung prüfbareren Prüflinien angezeigt. Da Sie aber für die Inspektion nur eine Auswahl benötigen, müssen Sie diese auswählen und markieren. Nur die Prüflinien, die Sie ausgewählt haben, werden Ihnen auch in der Liste „**Verwalten der Inspektion**“ angezeigt.

Wichtig!

Bei der Erstanlage werden Ihnen nur die Zimmer angezeigt, weil noch keine Prüflinien gewählt wurden!



Prüflinien manuell aktualisieren für ein Zimmer

Haben Sie für ein bestimmtes Zimmer die Prüflinien gelöscht, so können Sie diese über den blauen Button wieder aktualisieren. Es werden alle gewählten Prüflinien eingefügt.




Einzelne nichtgewählte Prüflinien hinzufügen

Über diesen Button lassen sich einzelne Prüflinien, die Sie nicht generell gewählt haben, für das Zimmer hinzufügen. Durch Betätigung des Übernahmehubtons wird die gewünschte Prüflinie dem Zimmer zugeordnet.



Anwesenheit

Inspektion durchführen

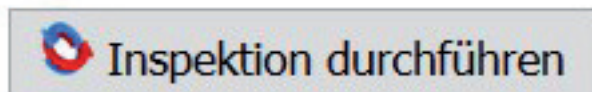

Verwalten der Inspektionen
Mustereinrichtung

Angemeldet als:

Zimmer Auswahl Prüflinien Inspektion durchführen Aktualisierung Prüflinien Ausgabe als:

Auswahl: Alle Inspektionszeitraum: 3

Zimmer:	freier Zimmertext:	Anmerkungen Prüflinie:	geprüft:
Bad:127 *127	<input type="text"/>		
	Anwesenheit	<input type="text"/>	23.01.2019
	WC-Ruf	<input type="text"/>	23.01.2019
	Zi-Ruf	<input type="text"/>	05.09.2018
Bad:227 *227	<input type="text"/>		
	Anwesenheit	<input type="text"/>	20.01.2019
	WC-Ruf	<input type="text"/>	13.12.2018
Bad:321 *321	<input type="text"/>		
	Anwesenheit	<input type="text"/>	04.11.2018
	WC-Ruf	<input type="text"/>	14.06.2018
	Zi-Ruf	<input type="text"/>	04.11.2018

Ist die Liste der Zimmer mit den zugehörigen Prüflinien noch gültig, so können über den Button „**Inspektion durchführen**“ die Prüflinien für den gewählten Inspektionszeitraum aktualisiert werden. Als Prüfdatum wird das aktuellste Datum angezeigt und die Zeile farbig markiert. Es ist grün hinterlegt, wenn das Datum der geprüften Ruflinie innerhalb des Inspektionszeitraumes ist. Andernfalls wird es in rot angezeigt und muss manuell geprüft werden.




Einzelinspektion einer ausgewählten Prüflinie

Wurde eine manuelle Überprüfung und Auslösung von Ruflinien vor Ort durchgeführt, so können einzelne Prüflinien manuell geprüft und aktualisiert werden.

Achtung!

Wurde eine manuelle Überprüfung und Auslösung von Ruflinien vor Ort durchgeführt, so kann eine erneute Inspektionsprüfung, mit Hilfe des Programms, erst nach 24 Stunden durchgeführt werden.

Aktualisierung der Prüflinien

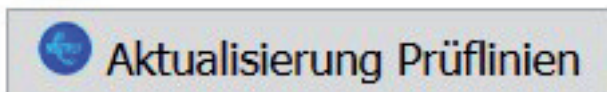

Verwalten der Inspektionen
Mustereinrichtung

Angemeldet als:

Zimmer Auswahl Prüflinien Inspektion durchführen Aktualisierung Prüflinien Ausgabe als:

Auswahl: Alle Inspektionszeitraum: 3

Zimmer:	freier Zimmertext:	Anmerkungen Prüflinie:	geprüft:
Bad:127 *127	<input type="text"/>		
	Anwesenheit	<input type="text"/>	23.01.2019
	WC-Ruf	<input type="text"/>	23.01.2019
	Zi-Ruf	<input type="text"/>	05.09.2018
Bad:227 *227	<input type="text"/>		
	Anwesenheit	<input type="text"/>	20.01.2019
	WC-Ruf	<input type="text"/>	13.12.2018
Bad:321 *321	<input type="text"/>		
	Anwesenheit	<input type="text"/>	04.11.2018
	WC-Ruf	<input type="text"/>	14.06.2018
	Zi-Ruf	<input type="text"/>	04.11.2018

Diese Funktion muss ausgeführt werden:

- bei der Erstinbetriebnahme
- Änderung der Auswahl von Prüflinien
- und nach Baumaßnahmen

Durch Betätigung dieses Buttons werden alle bisherigen Prüflinien gelöscht und gemäß der ausgewählten Prüflinien neu erstellt. Gleichzeitig wird eine Inspektion für den gewählten Inspektionszeitraumes durchgeführt.

Aktualisierung der Prüflinien

Ausgabe als:



PDF-Ausgabe

Ausgabe der Inspektion



Ausgabe Datum: 26.01.2019
Organisation:
Einrichtung:
Inspektionszeitraum: 12 Monate
Mitarbeiter:

Zimmer:	freier Zimmertext:	Prüfung:	Anmerkung:	Datum geprüft:	Aktionen:
Bad127 127		Anwesenheit		23.01.2019	geprüft!
Bad127 127		WC-Ruf		23.01.2019	geprüft!
Bad127 127		Zi-Ruf		05.09.2018	geprüft!
Bad227 227		Anwesenheit		20.01.2019	geprüft!
Bad227 227		WC-Ruf		13.12.2018	geprüft!
Bad321 321		Anwesenheit		04.11.2018	geprüft!
Bad321 321		WC-Ruf		14.06.2018	geprüft!
Bad321 321		Zi-Ruf		04.11.2018	geprüft!
Bad424 424		Anwesenheit		15.01.2019	geprüft!
Bad424 424		WC-Ruf		27.11.2018	geprüft!
Bad424 424		Zi-Ruf		13.08.2018	geprüft!
Bad518 518		Anwesenheit		14.06.2018	geprüft!
Bad518 518		WC-Ruf		14.06.2018	geprüft!
Bad518 518		Zi-Ruf		28.12.2017	Muss noch geprüft werden!
Bad612 612		Anwesenheit		22.01.2019	geprüft!
Bad612 612		WC-Ruf		22.01.2019	geprüft!
Bad612 612		Zi-Ruf		30.11.2017	Muss noch geprüft werden!
Caffeteria EG 025		Anwesenheit		07.01.2019	geprüft!
Caffeteria EG 025		Zi-Ruf		24.11.2018	geprüft!
Esszimmer638 638		Anwesenheit		20.01.2019	geprüft!
Esszimmer638 638		Zi-Ruf		31.08.2018	geprüft!
Esszimmer107 107	1.OG Esszimmer 107	Anwesenheit		21.11.2018	geprüft!
Esszimmer107 107	1.OG Esszimmer 107	Zi-Ruf		21.11.2018	geprüft!
Esszimmer207 207	2.OG Esszimmer 207	Anwesenheit		17.11.2018	geprüft!
Esszimmer207 207	2.OG Esszimmer 207	Zi-Ruf		17.11.2018	geprüft!

csv-Ausgabe

Ausgabe_Inspektion_26.01.2019.csv (Schreibgeschützt) - LibreOffice Calc

File Edit View Insert Format Table Data Extras Window Help

Output: Ausgabe der Inspektion

Das Dokument ist schreibgeschützt geöffnet.

	A	B	C	D	E	F
1	Ausgabe der Inspektion					
2						
3	Ausgabe Datum			26.01.19		
4	Organisation					
5	Einrichtung					
6	Inspektionszeitraum	12 Monate				
7	Mitarbeiter					
8						
9	Zimmer	freier Zimmertext	Pruefung	Anmerkung	Datum geprueft	Aktionen
10	Bad:127 *127		Anwesenheit		23.01.19	geprueft!
11	Bad:127 *127		WC-Ruf		23.01.19	geprueft!
12	Bad:127 *127		Zi-Ruf		05.09.18	geprueft!
13	Bad:227 *227		Anwesenheit		20.01.19	geprueft!
14	Bad:227 *227		WC-Ruf		13.12.18	geprueft!
15	Bad:321 *321		Anwesenheit		04.11.18	geprueft!
16	Bad:321 *321		WC-Ruf		14.06.18	geprueft!
17	Bad:321 *321		Zi-Ruf		04.11.18	geprueft!
18	Bad:424 *424		Anwesenheit		15.01.19	geprueft!
19	Bad:424 *424		WC-Ruf		27.11.18	geprueft!
20	Bad:424 *424		Zi-Ruf		13.08.18	geprueft!
21	Bad:518 *518		Anwesenheit		14.06.18	geprueft!
22	Bad:518 *518		WC-Ruf		14.06.18	geprueft!
23	Bad:518 *518		Zi-Ruf		28.12.17	muss noch geprueft werden!
24	Bad:612 *612		Anwesenheit		22.01.19	geprueft!
25	Bad:612 *612		WC-Ruf		22.01.19	geprueft!
26	Bad:612 *612		Zi-Ruf		30.11.17	muss noch geprueft werden!
27	Caffeteria EG *025		Anwesenheit		07.01.19	geprueft!
28	Caffeteria EG *025		Zi-Ruf		24.11.18	geprueft!
29	Esszimmer:638 *638		Anwesenheit		20.01.19	geprueft!
30	Esszimmer:638 *638		Zi-Ruf		31.08.18	geprueft!
31	Esszimmer:107 *107	1.OG Esszimmer 107	Anwesenheit		21.11.18	geprueft!
32	Esszimmer:107 *107	1.OG Esszimmer 107	Zi-Ruf		21.11.18	geprueft!
33	Esszimmer:207 *207	2.OG Esszimmer 207	Anwesenheit		17.11.18	geprueft!
34	Esszimmer:207 *207	2.OG Esszimmer 207	Zi-Ruf		17.11.18	geprueft!

Wichtige Anmerkungen:

Die angezeigten Meldungstexte entsprechen den bei der Konfiguration des Systems festgelegten Meldungstexten. Üblicherweise werden die Standard-Meldungstexte übernommen. Projektbezogene Meldungstexte können hiervon abweichen.

Die Standard-Meldungstexte sind:

Für **„Rufe“**:

„Notruf“

Notrufauslösung im Zimmer/WC mit besonderem Signal, zur Anforderung von zusätzlichem Personal, nach erfolgter Anwesenheitsmarkierung

„Bett-1“

Rufauslösung an Bett 1

„Bett-2“

Rufauslösung an Bett 2

„Diagn.-Ruf“

Diagnostik-Rufauslösung z. B. von medizinischem, technischem Gerät

„WC-Ruf“

Rufauslösung im WC

„Zi-Ruf“

Rufauslösung im Zimmer

„Funk/Tel.-Ruf“

Rufauslösung von Funkrufsender(n)

„Feuer“

Rufauslösung von Brandmelder(n)

„Vital-Ruf“

Rufauslösung der Vitalüberwachung

„Stecker-R“

Automatische Rufauslösung wenn ein eingestecktes Rufauslösegerät abgesteckt wurde

„Service“

Service-Rufauslösung an Bett 1 oder Bett 2

Für **„Meldungen“**:

„Anwesenheit“

Anwesenheit wurde eingeschaltet

Für **„Rückstellung“**:

„Meldung geht“

Rückstellung aller Rufe und Meldungen

Für **„Störung“**:

„St.-E“

Meldung eines Fehlers an einem Birntaster oder Birntasteranschlusskabel des signalisierten Zimmers

„St.-L“

Meldung einer Linienstörung zwischen der Zimmerelektronik und Zimmerkomponente(n)

„Vb.-Stoerung“

Meldung einer Verbindungsstörung. Keine Verbindung zum Zimmer möglich

